

KenkoTouch®

avec Technologie brevetée Dynaflux® et TriPhase™

Une expérience unique de massage magnétique



#2316

KenkoTouch™

avec la technologie brevetée DynaFlux® et TriPhase®

Le massage est un traitement prouvé et efficace pour les douleurs et l'inflammation musculaires. Un massage en profondeur peut desserrer les muscles tendus, assouplir le malaise, stimuler la circulation et soulager le stress. Un bon massage peut produire des résultats positifs, même pour ceux dans l'état de santé excellent, qui jouissent d'une excellente santé. KenkoTouch est un unique système avancé qui vous donne une expérience de massage accrue.

SURFACE ACTIVE QUI FAVORISE LA RELAXATION ET LE SOULAGEMENT

- Nodules mobiles produisent une sensation ferme, légèrement cédant, des mouvements qui ressemblent un massage manuel par un praticien qualifié
- La conception simple et fiable élimine la vibration habituellement trouvée dans les appareils de massage à main
- Peut aider à réduire la tension, vous rendant plus détendu

UN DESIGN DE POINTE POUR UNE UTILISATION FACILE ET CONFORTABLE

- La vitesse de massage se sélectionne parmi trois réglages et un arrêt automatique après 10 minutes
- Le détecteur de la chaleur éteint l'appareil automatiquement à la température interne de 80 °C/176 °F
- Fonctionne avec une batterie interne rechargeable et un connecteur USB
- Contour ergonomique, sangle réglable et amovible

LA TECHNOLOGIE MAGNÉTIQUE BREVETÉE DYNAFLUX REPRÉSENTE

- Une percée scientifique non trouvée dans d'autres appareils magnétiques, qui crée un effet multiplicateur
- DynaFlux augmente la couverture magnétique sur une zone plus large et étend la profondeur du champ
- Le résultat est une pénétration plus approfondie et la force magnétique accrue


LA TECHNOLOGIE DE L'INFRAROUGE LOINTAIN PEUT RÉDUIRE L'ENDOLORISSEMENT

- Les fibres réfléchissantes spécialisées absorbent l'énergie ambiante et la rendent en l'infrarouge lointain pour un réchauffement doux
- Cette technologie est dotée de l'autorégulation afin de prévenir l'accumulation de la chaleur pour que vous restiez confortable
- La chaleur uniforme et douce contribue à relaxer vos muscles, tendons et articulations tendus ou froissés



LA TECHNOLOGIE DES IONS NÉGATIFS AIDE À VOTRE RAFFRAÎCHISSEMENT ET INVIGORATION

- Elle crée la concentration des ions négatifs que l'on trouve dans l'air de la forêt, et donne un sentiment du bien-être
- Elle contribue à promouvoir un sentiment de la relaxation

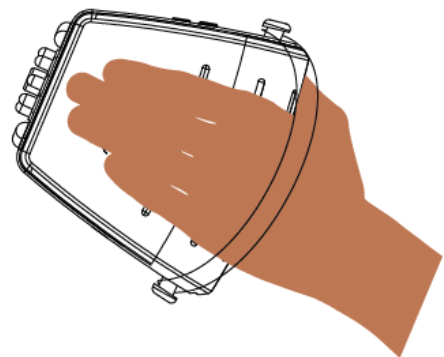

KenkoTouch®

avec Technologie brevetée Dynaflux® et TriPhase™

*Une expérience unique de massage
magnétique*



#2316

INFORMATIONS DU PRODUIT

TECHNOLOGIES NIKKEN
PRÉSENTÉES

Nikken KenkoTouch solénoïde à mouvement alternatif de massage, technologie magnétique DynaFlux® (brevet des Etats-Unis N° 9 265 966), technologie de l'infrarouge lointain, technologie des ions négatifs

LA FORCE MAGNÉTIQUE

1 600 gauss (repos)

L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Une batterie DC rechargeable de 3,7 volts, câble de recharge à interface USB

MATÉRIAUX

Aimants de ferrite, fibres de céramique réfléchissante, matériel en ions négatifs, acier, diodes électroluminescentes, polyéthylène, silicone de grade médical

POIDS

12,5 oz/354 g

COMMENT UTILISER


Mettez l'appareil en marche et sélectionnez la vitesse désirée. Appliquez l'appareil à l'endroit désiré du corps. L'appareil est muni d'une minuterie automatique de 10 minutes mais peut être redémarré plusieurs fois. Une fois qu'il s'est arrêté automatiquement, laissez refroidir pendant 10 minutes avant de redémarrer. Il est recommandé de ne pas dépasser six fois par jour son utilisation. Ne pas utiliser pendant le chargement de l'appareil. Débranchez lorsque la charge est terminée.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Tenir à l'écart de l'humidité.
Nettoyer la surface avec chiffon.

LA GARANTIE

1 an

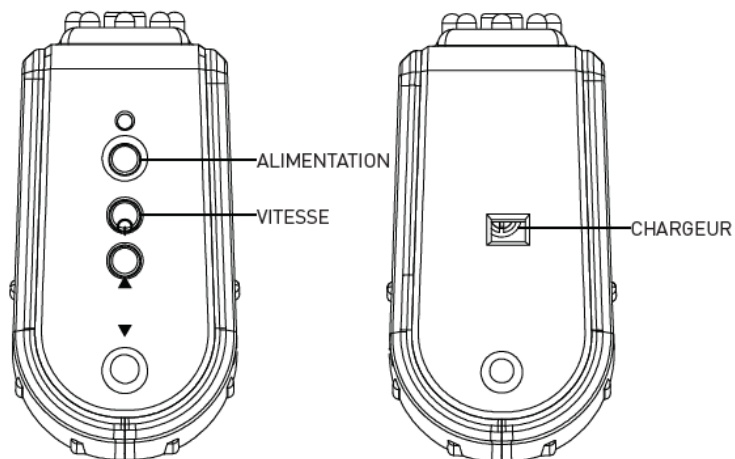

ATTENTION : Si vous utilisez un appareil médical électronique tel qu'un stimulateur cardiaque, si vous avez un implant chirurgical sensible aux champs magnétiques, si vous êtes au premier trimestre de grossesse ou si vous avez des problèmes de santé, consultez un médecin avant d'utiliser les produits magnétiques. Si vous ressentez une douleur, un malaise ou une irritation suite à l'application de ce produit, cessez l'utilisation.

Les spécifications et l'apparence peuvent se faire l'objet d'une modification sans préavis.

© 2017 Nikken Inc.